

ANEXO III.B – Rótulo e Instrucciones de Uso

Fabricado por: **Thal Nippon Rubber Industry Public Company Limited**, 1 Charoenrat Road, Thugwatdon, Sathon, Bangkok 10120, Tailandia.

Importador y Distribuido por: **Neoseg S.A.**, General Manuel Savio N° 6073, Garín, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Marca: **Maxx**

Modelo: Espermicida

Contiene NONOXINOL-9 en el exterior e interior del preservativo
Este agente espermicida actúa sobre los espermatozoides, disminuyendo el riesgo de embarazo.

Contiene x preservativos lisos de látex de caucho natural
(máximo doce envases primarios conforme Disposición ANMAT 2337/2002)
No fraccionar para la venta

Lubricado con aceite de silicona – Ancho Nominal: 52 mm

Producto para usar una sola vez

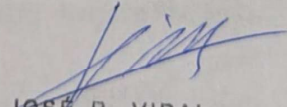
Almacenamiento: Proteja este producto del calor, la humedad y de la luz

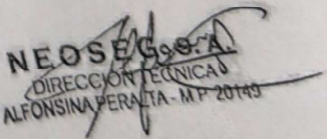
Lote XXXXXXXXXX

Fab. XXXXXXXX

Vto. XXXXXXXX (3 años contados a partir de la fecha de fabricación)

Lea instrucciones de uso en el interior del estuche


JOSE R. VIDAL
Apoderado
NEOSEG S.A.

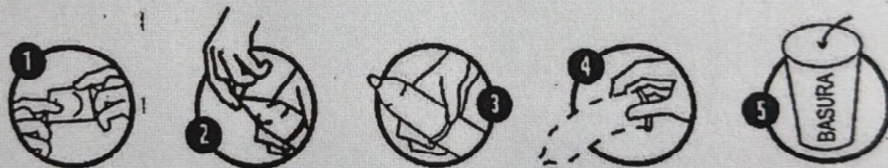

NEOSEG S.A.
DIRECCIÓN TÉCNICA
ALFONSINA PERALTA - M.P. 20143

Escaneado con CamScanner



Instrucciones de uso:

- Abra el envoltorio del preservativo con cuidado y sólo al momento de usarlo
- Apriete la punta del preservativo con los dedos para que no quede aire.
- Desenrolle totalmente el preservativo sobre el pene erecto.
- Una vez producida la eyaculación, cuando el pene todavía está erecto, saque con cuidado el preservativo para que no se derrame semen.
- Hágale un nudo y tírelo en la basura, no en el inodoro.
- No utilizar lubricantes tipo vaselina, aceite para bebés u otros productos derivados del petróleo, pues éstos dañan el preservativo.
- Si necesita lubricante adicional, use sólo lubricante de base acuosa.
- Use un preservativo nuevo cada vez que repita el acto sexual.
- Los preservativos usados de acuerdo a las instrucciones son el medio más efectivo para prevenir el embarazo, y contagio de HIV y otras ITS, pero no eliminan el riesgo en un 100%.
- Ante reacciones alérgicas, consulta con su médico.
- Recuerdo que los preservativos deben ser protegidos del calor, la luz y la humedad, para mantener sus propiedades, y deben ser utilizados antes de la fecha de su vencimiento.



Producto Médico de Uso sin Prescripción

Ante cualquier reacción alérgica en irritación en pene ó vagina, discontinúe su uso y consulte a su médico

Directora Técnica: Alfonsina Peralta – M.P. 20.149

Autorizado por ANMAT, Registro PM: 2863-7

JOSÉ R. VIDAL
Apoderado
NEOSEG S.A.

NEOSEG S.A.
DIRECCIÓN TÉCNICA
ALFONSINA PERALTA M.P. 20149

Escaneado con CamScanner



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-79248796-APN-INPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 18 de Agosto de 2026

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- 71942

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.18 11:06:15 -03:00

Lorena Terrizzano
Director Nacional
Instituto Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.18 11:06:16 -03:00