

PROYECTO DE RÓTULO

BAUSCH + LOMB

Biotrue™ Moisture Boost

Gotas Humectantes para lentes de contacto

SIN CONSERVADORES

Lubrica y rehumecta lentes de contacto

Humectación instantánea y duradera

Hasta 8 horas de humectación*

Mejora la humectabilidad de la lente y ayuda a prevenir los depósitos

Mejorado con AH, un humectante natural[†] + antioxidante + electrolito

Para lentes de contacto, incluidas las desechables diarias

pH equilibrado para igualar el de las lágrimas saludables

Ingredientes de origen natural

AH[†], electrolito y glicerina, ingredientes que se encuentran de forma natural en las lágrimas

Contiene un antioxidante que protege el AH de los radicales libres

*Basado en un estudio de laboratorio

[†]El hialuronano proviene de un proceso de fermentación natural a gran escala.

COMPOSICIÓN: Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto es una solución acuosa estéril, sin conservadores, amortiguada, isotónica, que contiene ácido bórico, borato sódico, cloruro potásico, eritritol, poloxamina, glicerol e hialuronano.

Consulte siempre a su especialista de la salud visual antes de cambiar a cualquier otro producto o si tiene dudas sobre sus ojos.

No utilice el producto si usted es alérgico a cualquiera de los componentes de la fórmula.


Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

Página 1 de 3

IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

PRECAUCIONES:

- Volver a colocar la tapa después de usar.
- Utilizar antes de la fecha de caducidad indicada en la caja de cartón y en la botella.
- Desechar cualquier solución remanente a los 90 días de abierta la botella.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

CONSULTE EL INTERIOR DE LA CAJA DE CARTÓN PARA CONOCER INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.

No utilice el producto si no tiene la banda de garantía o tiene señales de haber sufrido ruptura previa.

INSTRUCCIONES: Para lubricar y rehumectar las lentes de contacto, siga estos pasos:

PASO 1: Con la lente puesta, retirar la tapa, aplicar 1 o 2 gotas en el ojo y parpadear 2-3 veces según sea necesario. PASO 2: Si la lente sigue sin sentirse cómoda, añadir otra gota. Para ayudar a evitar la acumulación de depósitos: Aplicar 2 gotas en cada ojo y parpadear 2-3 veces, 4 veces al día.

Consultar instructivo de uso

Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aséptico

Almacenar la solución a temperatura ambiente (15°C – 25°C)

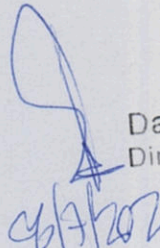
CONDICIÓN DE USO: Uso sin prescripción

Frasco multidosis estéril sin conservadores

CONTENIDO: 10 ml

Inspirado en la biología de sus ojos®

Creemos que la mejor inspiración procede de la naturaleza. Por eso nuestra fórmula se inspira en la biología del ojo.


Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

Página 2 de 3

IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

Para saber más sobre nuestro frasco multidosis especial sin conservadores, visite
www.bausch.com

www.biotrue.com

Información sobre el producto: En Argentina llame al 0-800-444-5662

Fabricado por:

Bausch & Lomb Incorporated.

8507 Pelham Road Greenville SC, 29615, Estados Unidos de América.

Fabricante legal:

Bausch & Lomb Incorporated.

1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609, Estados Unidos de América

Hecho en E.U.A.

Importado comercializado en Argentina por:

BAUSCH & LOMB ARGENTINA S.R.L.

Santos Dumont 4733, C.A.B.A., Argentina

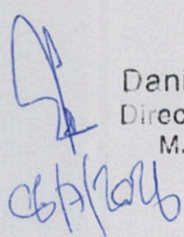
D.T.: Daniel Ziegler, Farmacéutico

Autorizado por la ANMAT PM 1087-105

Los símbolos ®/™ son marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Lote

Vencimiento


Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

INSTRUCCIONES DE USO

BAUSCH + LOMB

Biotrue® Moisture Boost

Gotas Humectantes para Lentes de Contacto

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, ya que contienen información importante sobre la forma de utilizar el producto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico, a su farmacéutico, al profesional del cuidado de la visión o póngase en contacto con nosotros.

SIN CONSERVADORES

Lubrica y rehumecta lentes de contacto

Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto

Creemos que la mejor inspiración procede de la naturaleza. Por eso Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto se inspira en la biología del ojo. Nuestras innovadoras gotas no contienen conservadores y están equilibradas para igualar el pH de las lágrimas saludables. Nuestra fórmula contiene ingredientes de origen natural, como el hialuronano (AH), un humectante natural que se encuentra en las lágrimas†, un antioxidante para proteger el AH y un electrolito que se encuentra de forma natural en las lágrimas. Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto ayuda a prevenir la formación de depósitos y proporciona una humectación instantánea que dura hasta 8 horas*. Recomendadas para todo tipo de lentes de contacto blandas, incluidas las desechables diarias y las lentes rígidas permeables al gas (RGP).

INSTRUCCIONES: Para lubricar y rehumectar las lentes de contacto, siga estos pasos:
PASO 1: Con la lente puesta, retirar la tapa, aplicar 1 o 2 gotas en el ojo y parpadear 2-3 veces según sea necesario. PASO 2: Si la lente sigue sin sentirse cómoda, añadir otra gota. Para ayudar a evitar la acumulación de depósitos: Aplicar 2 gotas en cada ojo y parpadear 2-3 veces, 4 veces al día.

COMPOSICIÓN: Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto es una solución acuosa estéril, sin conservadores, amortiguada, isotónica, que contiene ácido bórico, borato sódico, cloruro potásico, eritritol, poloxamina, glicerol e hialuronano.

ACCIONES: Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto lubrica y rehumecta las lentes de contacto blandas (hidrofílicas) incluidas las lentes de contacto de hidrogel de silicona y las lentes de contacto RGP (acrilato de silicona [SA] y acrilato de fluorosilicona [FSA]). Cuando se utiliza 4 veces al día, Biotrue™ Moisture Boost Gotas Hidratantes para Lentes de Contacto ayuda a prevenir la acumulación de depósitos en las lentes.

INDICACIONES (Usos):

Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

Página 1 de 5

IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto está indicado para lubricar y rehumectar las lentes de contacto blandas (hidrofílicas), incluidas las de hidrogel de silicona, así como las lentes de contacto RGP de SA y FSA durante su uso. El producto puede utilizarse con lentes de uso diario o prolongado y con lentes desechables.

CONTRAINDICACIONES (Razones para no usar):

No usar si es alérgico a alguno de los ingredientes de este producto. **LOS PROBLEMAS CON LAS LENTES DE CONTACTO Y LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS LENTES PODRÍAN PROVOCAR UNA INFECCIÓN Y/O ÚLCERA EN LA CÓRNEA Y CAUSAR LA PÉRDIDA DE VISIÓN.** Es esencial que siga las indicaciones de su especialista de la salud visual y todas las instrucciones del etiquetado para el uso y cuidado apropiados de las lentes y los productos para el cuidado de las lentes, incluido el estuche de las lentes. Los problemas de ojos, incluidas las úlceras de córnea, pueden desarrollarse rápidamente y provocar pérdida de visión. Las lentes de uso diario no están indicadas para usarlas durante toda la noche y no deben usarse mientras se duerme. Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de reacciones adversas serias aumenta cuando estas lentes se usan durante toda la noche. Las lentes de uso prolongado deben retirarse periódicamente para su limpieza y desinfección o para su desecho y sustitución según los plazos indicados por su especialista de la salud visual. Los estudios clínicos han demostrado que existe una mayor incidencia de reacciones adversas serias en los usuarios de lentes de contacto de uso prolongado en comparación con los usuarios de lentes de contacto de uso diario. Los estudios también han demostrado que el riesgo de reacciones adversas serias aumenta cuanto más tiempo se usan las lentes de contacto de uso prolongado antes de retirarlas para su limpieza y desinfección o para su desecho y sustitución. Los estudios también han demostrado que los fumadores tienen una mayor incidencia de reacciones adversas. Si experimenta molestias de ojos, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento de los ojos, quítese inmediatamente las lentes y consulte de inmediato a su especialista de la salud visual. Se recomienda acudir al especialista de la salud visual con regularidad para mantener la salud de sus ojos.

FECHA DE DESCARTE:

- Desechar la solución sobrante dentro de los 90 días siguientes a la apertura.

ADVERTENCIA:

- El uso de sus gotas para lentes de contacto después de la fecha de desecho puede contaminar la solución y provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

ACTIVIDAD ACUÁTICA:

- No exponga sus lentes de contacto al agua mientras las lleve puestas.
- Pida a su especialista de la salud visual recomendaciones sobre el uso de sus lentes durante cualquier actividad acuática.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- Siga siempre las instrucciones de uso del producto. El incumplimiento de las instrucciones del producto puede provocar pérdida de visión.
- Visite regularmente a su especialista de la salud visual.

Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

Página 2 de 5

IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

- Lávese y séquese siempre las manos antes de manipular las lentes.
- Biotrue™ Moisture Boost Gotas Humectantes para Lentes de Contacto no desinfecta sus lentes.
- Para evitar la contaminación, no toque ninguna superficie con la punta del contenedor. Vuelva a colocar la tapa después de usar.
- No altere el frasco especial, la abertura de la punta ni el revestimiento del interior de la tapa, que mantienen la esterilidad sin conservadores.

PRECAUCIONES:

- Volver a colocar la tapa después de usar.
- Utilizar antes de la fecha de caducidad indicada en la caja de cartón y en la botella.
- Desechar cualquier solución remanente a los 90 días de abierta la botella.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

REACCIONES ADVERSAS (Problemas y qué hacer)

Debe tener en cuenta que pueden ocurrir los siguientes problemas:

- Picazón de ojos, ardor, comezón (irritación) u otro tipo de dolor de ojos
- La comodidad es menor que cuando se colocó la lente por primera vez en el ojo
- Sensación anormal de tener algo en el ojo (por ejemplo, cuerpo extraño, área arañada)
- Acuosidad excesiva (lagrimeo) o secreciones inusuales de los ojos
- Enrojecimiento de los ojos
- Disminución de la nitidez de la visión (mala agudeza visual)
- Visión borrosa, arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)
- Ojos secos

SI NOTA ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS ANTERIORES: Quítese inmediatamente las lentes.

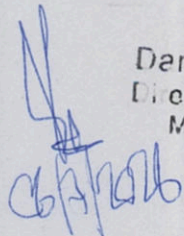
- Si la molestia o el problema desaparecen, revise bien la lente.
- Si la lente está dañada de algún modo, no vuelva a colocársela en el ojo. Coloque la lente en el estuche y comuníquese con su especialista de la salud visual.
- Si la lente tiene suciedad, una pestaña u otro cuerpo extraño o si el problema desaparece y la lente no parece estar dañada, límpiela, enjuáguela y desinféctela minuciosamente y vuelva a colocársela.

Si el problema persiste, quítese inmediatamente la lente y consulte a su especialista de la salud visual.

Si ocurre alguno de los problemas anteriores, puede tratarse de una afección seria, como una infección, una úlcera de córnea, una neovascularización o una iritis. Busque inmediatamente la identificación profesional del problema y un tratamiento rápido para evitar daños serios en los ojos.

UNA BUENA HIGIENE EN EL CUIDADO DE LAS LENTES:

- Lávese y séquese siempre las manos antes de manipular las lentes.
- Limpie, enjuague y desinfecte sus lentes cada vez que se las quite.


Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

Página 3 de 5

IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

- Siempre manipule primero la misma lente, la derecha o la izquierda, para evitar confusiones.
- Antes del primer uso y después de cada uso adicional, vacíe y enjuague siempre el estuche de las lentes y las tapas con una solución de enjuague nueva y deje secar al aire.
- Cuando use lentes desechables, cada vez que se quite una lente, deséchela y sustitúyala por una nueva.

CÓMO SE SUMINISTRA: Biotrue™ Moisture Boost Gotas Hidratantes para Lentes de Contacto se suministra en un frasco de 10 mL. Los frascos y las cajas de cartón están marcados con un número de lote y una fecha de caducidad.

Si no está completamente satisfecho, quiere reportar una queja, un evento adverso o necesita información adicional sobre el producto, llame en Argentina al 0-800-444-5662

La explicación de los símbolos se encuentra en

www.bausch.com/symbols

Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aséptico

Almacenar la solución a temperatura ambiente (15°C – 25°C)

CONDICIÓN DE USO: Uso sin prescripción

Fabricado por:

Bausch & Lomb Incorporated.

8507 Pelham Road Greenville SC, 29615, Estados Unidos de América.

Fabricante legal:

Bausch & Lomb Incorporated.

1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609, Estados Unidos de América.

Importado y comercializado en Argentina por:

BAUSCH & LOMB ARGENTINA S.R.L.

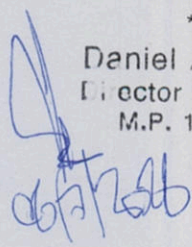
Santos Dumont 4733, C.A.B.A., Argentina

www.bausch.com

www.biotrue.com

†El hialuronano proviene de un proceso de fermentación natural a gran escala.

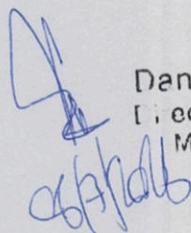
*Basado en un estudio de laboratorio


Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787

Página 4 de 5

IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

Los símbolos ®/™ son marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated



Daniel Ziegler
Director Técnico
M.P. 13787



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-81542847-APN-INPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 24 de Agosto de 2026

Referencia: Rótulo y manual de instrucciones 79633

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.24 15:16:07 -03:00

Lorena Terrizzano
Director Nacional
Instituto Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.24 15:16:08 -03:00