

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

Modelo de rótulo:

Allanmar International Company S.R.L. Futerman International Products		Hilarión De la Quintana 833 2000 Rosario - Santa Fe - República Argentina Tel: 0341 – 4630360 Fax: 0341- 4630360 www.futerman.com.ar	
Nombre genérico: Relleno dérmico de Ácido Hialurónico, L-L-Carnitina, Cafeína, Troxerutina Marca: Triterpén / Hyaluromax / Beautylook / Bellafiller / Perfect Filler / Bio Plus / Rennova / Cientific / Extrafirm / Hydroxymax / Biohydroxy / A-Fill / Radesmax / Hydroxybell / Cientific Hydroxybell / Biostimulax / Dermastimulax / Dermahydroxy / Hydroxystimul / Hydroxy Gold / Cientific Bio Plus / Cientific Biostimul / Hydroxytone / Hydroxyfill / Hydroxyplus / Hydroxyderm / Hydroxybeauty / Beautymax / Beautyplus / Hydroxy Bio Plus / Bio Hydroxy Plus / Bioxy / Bioxy Plus / Intragel / Unika Modelo: Intraderm/ RM - Remodeling/ R - Redux Lote: xxxxx Contiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 viales x 2ml, 2,5ml, 3ml, 4ml o 5ml, o jeringas x 1ml, 2ml, o 3ml. Puede o no contener agujas y/o jeringas descartables.			
Producto estéril		Método: Calor húmedo	
	MM/AAAA (Fecha de vencimiento)		Material para utilizar por única vez.
	No usar el producto si el envase está abierto o dañado. No reutilizar. No reesterilizar. Conservar entre 2°C y 35°C- Evitar la exposición a la luz. Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.		
	Antes de usar, consulte las instrucciones de uso.		
Director Técnico: Farm.María L. Borga MP:2106		Autorizado por ANMAT. PM-1058-35	

Datos del rótulo:

Nombre genérico: Relleno dérmico de Ácido Hialurónico, L-L-Carnitina, Cafeína, Troxerutina.
Marca: Triterpén / Hyaluromax / Beautylook / Bellafiller / Perfect Filler / Bio Plus / Rennova / Cientific / Extrafirm / Hydroxymax / Biohydroxy / A-Fill / Radesmax / Hydroxybell / Cientific Hydroxybell / Biostimulax / Dermastimulax / Dermahydroxy / Hydroxystimul / Hydroxy Gold / Cientific Bio Plus / Cientific Biostimul / Hydroxytone / Hydroxyfill / Hydroxyplus / Hydroxyderm / Hydroxybeauty / Beautymax / Beautyplus / Hydroxy Bio Plus / Bio Hydroxy Plus / Bioxy / Bioxy Plus / Intragel / Unika
Modelo: Intraderm/ RM - Remodeling/ R - Redux
Contiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 viales x 2ml, 2,5ml, 3ml, 4ml o 5ml, o jeringas x 1ml, 2ml, o 3ml. Puede o no contener agujas y/o jeringas descartables.
Producto estéril Método: Calor húmedo
Material para utilizar por única vez.
No usar el producto si el envase está abierto o dañado.
No reutilizar. No reesterilizar.
Conservar entre 2 y 35°- Evitar la exposición a la luz.
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

Antes de usar, consulte las instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux es un gel inyectable estéril de ácido hialurónico de alto peso molecular (2,5 Million Dalton) de origen no animal, L-Carnitina, cafeína y troxerutina, indicado para tonificar y revitalizar la piel disminuyendo la flacidez, las irregularidades dérmicas y los acúmulos adiposos, no reutilizable y no reesterilizable.

Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux está preparado con materiales sintéticos absorbibles, formulado de manera de asegurar resultados clínicos durables. Se formula en una solución estéril, apirógena y fisiológica de ácido hialurónico.

El ácido hialurónico proporciona hidratación, aumenta la elasticidad de la piel y reduce los signos del envejecimiento. La L-Carnitina, cafeína y troxerutina, en combinación con el ácido hialurónico, mejoran la textura de la piel reduciendo las irregularidades causadas por la celulitis y disminuyendo la flacidez, redensificando la superficie dérmica.

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES INVOLUCRADOS

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.

ESTERILIZACION

Producto estéril por el método de calor húmedo. No reesterilizar.

Uso indicado

Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux está indicado para tonificar y revitalizar la piel disminuyendo la flacidez, las irregularidades dérmicas y los acúmulos adiposos. Contiene propiedades hidratantes y nutritivas que son capaces de modelar los tejidos envejecidos y disminuir la celulitis.

Se aplica por medio de inyecciones intradérmicas en la zona periumbilical, glúteos y en la cara interna de los brazos y muslos.

Contraindicaciones

- No debe utilizarse en pacientes con las siguientes patologías:
 - Afecciones, tumores, infecciones y/o inflamación cutánea en la zona a tratar o en áreas próximas, secuelas de infecciones de estreptococos.
 - Diabetes descontrolada, reumatismo articular agudo, anginas recurrentes, endocarditis.
 - Trastornos de coagulación, hemorrágicos.
 - Enfermedades cardíacas y/o tratamiento para una enfermedad cardíaca (bloqueadores beta).
 - Porfiria.
 - Epilepsia sin tratar.
 - Insuficiencia hepatocelular y/o tratamiento para una enfermedad hepática.
 - Hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico, a proteínas bacterianas grampositivas u otros componentes del producto.
 - Infecciones agudas o crónicas sin tratamiento o con estado general comprometido.

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

- Pacientes con acné y/o enfermedades inflamatorias en fase activa o susceptibles a desarrollar cicatrices hipertróficas o queloides.
- Antecedentes de enfermedad auto inmune, bajo tratamiento con terapia inmunológica.
- Mujeres embarazadas, lactancia y menores de 18 años.
- Alergia a alguno de los componentes del producto.
- No inyectar en huesos, tendones, ligamentos o vasos sanguíneos. La inyección intravascular puede causar embolización, oclusión de los vasos, isquemia o infarto.
- No utilizar juntamente con láser, peelings químicos o tratamientos dermoabrasivos. No se recomienda inyectar en lugares donde se han realizado otros implantes de relleno que no sean de ácido hialurónico o en su entorno.
- No inyectar si hay implantes de silicona líquida en la misma zona.
- En lesiones provocadas por herpes su uso es absolutamente contraindicado.
- Cualquier reacción inflamatoria proveniente de inyecciones es también una contraindicación.

Precauciones

- Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux está indicado únicamente para inyecciones intradérmicas (dermis media o superficial) y solo debe ser utilizado por profesionales de la salud que tengan formación, experiencia y que conozcan la anatomía y sitio de inyección.
- Los profesionales de la salud deben advertir al paciente de todos los riesgos potenciales del tratamiento antes de su realización y asegurarse de que los pacientes sean conscientes de signos y síntomas de posibles complicaciones.
- El punto de inyección debe realizarse en piel sana. Aun así, la inyección puede dejar pequeños puntos de equimosis, edema y/o hematomas especialmente en pacientes con medicación que pueda alterar la coagulación.
- La inyección de estos dispositivos médicos conlleva riesgo de infección.
- Utilizar el producto fuera de las áreas y planos de aplicación descritos en estas instrucciones de uso queda sujeto a criterio profesional.
- No hay datos clínicos disponibles sobre la eficacia y tolerancia en pacientes con antecedentes de una enfermedad autoinmune declarada. El profesional debe decidir la indicación en cada caso y realizar una vigilancia particular sobre los mismos. Se recomienda proponer un doble test previo y no inyectar si la enfermedad se encuentra activa.
- No hay datos clínicos disponibles en términos de tolerancia en pacientes con antecedentes de alergias graves múltiples o de shock anafiláctico. El profesional debe decidir la indicación en cada caso y realizar una vigilancia particular sobre los mismos. Se recomienda proponer un doble test previo o establecer un tratamiento preventivo.
- Los pacientes con antecedentes de enfermedad estreptocócica (anginas recidivantes, reumatismo articular agudo) deben ser objeto de un doble test antes de cualquier inyección. En caso de reumatismo articular agudo con localización cardíaca se recomienda no inyectar.
- Se recomienda iniciar profilaxis antiviral en pacientes con antecedentes de Herpes Simplex.
- Usar con precaución en pacientes con terapia con trombolíticos, anticoagulantes, o inhibidores de la agregación plaquetaria, como aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, usados durante 2 semanas previas al tratamiento. Pueden ocurrir equimosis,

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

edema y/o hematomas en el sitio de inyección.

- Antes de la inyección, el área debe ser totalmente desinfectada. Utilizar técnicas asépticas y práctica estándar para evitar infecciones cruzadas evitando el uso de cloruro de benzalconio u otras sales de amonio cuaternario.
- Recomendar al paciente que evite la exposición prolongada al sol, a los rayos UV, al frío, a temperaturas menores a 0°C, así como las saunas y los baños turcos durante las 2 semanas siguientes a la inyección.
- Recomendar al paciente no exponerse a baños de sol desde las 96hs. antes del implante. La exposición solar puede sensibilizar la zona a inyectar presentando posteriores reacciones en la zona tratada.
- Recomendar al paciente evitar tocar el área tratada hasta al menos 12 horas después del tratamiento.
- El producto debe ser mantenido a temperatura ambiente antes de realizar la aplicación a fin de minimizar la disconformidad del paciente.
- Evitar la ingesta de dosis elevadas de vitamina C, vitamina E, durante la semana anterior a la sesión de la inyección.
- Los pacientes con expectativas inalcanzables no son candidatos adecuados para someterse a este tratamiento.
- Si la aguja esta obturada, no aumentar la presión sobre el émbolo, detener la inyección y reemplazar la aguja.
- La composición del dispositivo hace que el producto sea compatible con los campos utilizados en resonancia magnética.

Advertencias

- No reutilizar ni reesterilizar. Es un producto de un solo uso que no debe administrarse a varios pacientes ni en más de una sesión.
- No transferir a otro recipiente ni utilizarse en conjunto con otros productos sanitarios.
- Sólo el contenido es estéril, el exterior de la presentación no.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente y desechar cualquier remanente según legislación vigente.
- No utilizar luego de la fecha de caducidad indicada en el rótulo. Verificar esta fecha previo a su uso.
- Comprobar la integridad del protector de esterilidad antes de usarlo. No utilizar si el embalaje presenta serios daños o si hay algún líquido dentro de la caja.
- Utilizar en un ambiente aséptico cumpliendo con las técnicas adecuadas.
- Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux debe inyectarse lentamente en la piel, solo por vía intradérmica y no por vía intravenosa ni cualquier otra vía de administración.
- Poca eficacia o pobre efecto tras una inyección del producto cuando este producto no es el indicado para efectuar la corrección que se desea realizar, cuando la cantidad de producto aplicada y/o cantidad de aplicaciones no son suficientes para corregir la zona deseada o cuando la elección del paciente no es la adecuada para la aplicación de este tipo de productos.
- La duración de los efectos depende de la edad del paciente, su fisiología, su estilo de vida (fumar y la exposición al sol o a los rayos UVA pueden acortar la duración de los efectos), la

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

cantidad inyectada y la técnica del médico.

Eventos adversos / efectos secundarios:

- Hematomas, equimosis, picor, edema, dolor o sensibilidad en el sitio del implante. Normalmente la resolución es espontánea a los pocos días de la inyección en la piel.
- Eritema, inflamación, durezas, pápulas/nódulos, hinchazón, induración. Absceso, atrofia/cicatrización, ampollas, dermatitis, decoloración, enrojecimiento, granuloma, hipersensibilidad, infección, isquemia/necrosis, masa, síntomas neurológicos como parestesia, prurito, erupción cutánea, reactivación del herpes infección, corta duración del efecto, teleangiectasia, urticaria.
- Poca eficacia o pobre efecto tras una inyección de Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux no aplicada en el sitio correcto y/o plano correcto y/o cantidad deficiente del producto necesaria para la corrección deseada.
- Alergias a cualquier componente del ácido hialurónico.
- Las peores complicaciones de las infiltraciones de ácido hialurónico aparecen cuando la intervención no la realiza un médico entrenado, puede provocar una deformidad debido a una mala inyección del producto con consecuencias graves para el aspecto. Aunque los efectos desaparecen progresivamente conforme se degrada el ácido hialurónico.
- Detenga inmediatamente la inyección si un paciente presenta cambios en la visión, signos de un derrame cerebral, palidez de la piel, dolor inusual, decoloración o aspecto reticular del tejido, necrosis, eventos isquémicos, infarto, hasta angioedema y choque anafiláctico durante o poco después del procedimiento.
- Los pacientes deben recibir atención médica inmediata y evaluación médica en caso de que se produzca una inyección intravascular.
- En caso de reacciones inflamatorias u otros efectos secundarios que no desaparezcan en 48 hs, el paciente debe informar inmediatamente a su médico quien tratará al paciente mediante el procedimiento adecuado. Considerar eliminación del producto por aspiración/drenaje, extrusión o degradación enzimática (inyecciones de hialuronidasa). Previo a cualquier procedimiento de remoción, la hinchazón puede ser reducida mediante el uso de AINEs o corticosteroides durante menos de 7 días.
- En los pacientes que hayan tenido reacciones de importancia clínica, la decisión de volver a someterlos a un tratamiento deberá tomarse teniendo en cuenta la causa y la magnitud de las reacciones anteriores.
- Cualquier otro efecto secundario no descrito de este producto médico, debe ser comunicado con urgencia al fabricante o al distribuidor de Intraderm/ RM - Remodeling/ R - Redux.

Información para el Paciente:

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra en el cuerpo de forma natural y que ayuda a hidratar y dar volumen a la piel. Cuando el organismo deja de producirlo de la manera que lo hacía en la juventud se pierden los efectos de hidratación y volumen de esta sustancia.

Los efectos de Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux dependen de las reaplicaciones correspondientes según cada caso considerando y el estado de la zona a tratar, dependiendo de

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

la edad, fisiología, estilo de vida (fumar y la exposición al sol o a los rayos UVA pueden acortar la duración de los efectos), la cantidad inyectada, el número de inyecciones y/o volúmenes necesarios para realizar un tratamiento eficaz y la técnica del médico.

Difícilmente pueda sentir dolor durante su aplicación, pero en caso de necesitarlo, el médico puede proceder a la colocación de un anestésico local en la zona de aplicación.

Dado que los resultados de la aplicación de Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux son inmediatos, usted puede seguir con sus actividades según la indicación de su médico después de dejar el consultorio.

Los efectos secundarios son leves y pasajeros. Solicítele a su médico que le informe antes de comenzar el tratamiento, las indicaciones de este, las contraindicaciones, las incompatibilidades, así como de los posibles efectos no deseados para optimizar los resultados. Recomendamos que si la persistencia de las reacciones inflamatorias o cualquier otro efecto secundario duran más allá de una semana deberá comunicarse inmediatamente con su médico. Evitar la ingesta de dosis elevadas de Vitamina C, Vitamina E, aspirina, antiinflamatorios o anticoagulantes durante la semana anterior a la sesión de la inyección.

Evitar tocar el área tratada hasta al menos 12 horas después del tratamiento.

Debe evitar maquillarse durante las 12 hs. siguientes a la inyección y evitar la exposición prolongada al sol, a los rayos UV, al frío, a temperaturas menores a 90C, así como las saunas y los baños turcos durante las 2 semanas siguientes a la inyección. Se le recomienda no aplicar presión o masajear el lugar de inyección durante los primeros días tras la aplicación.

Debe evitar tomar baños de sol no menos de 96 hs. antes de la aplicación del implante. La exposición solar puede sensibilizar la zona a inyectar presentando posteriores reacciones en la zona tratada.

Presentación

Cajas conteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 viales x 2ml, 2,5ml, 3ml, 4ml o 5ml, o jeringas x 1ml, 2ml, o 3ml, envasadas en pouch o blíster con etiquetas de trazabilidad por vial/jeringa e instrucciones de uso. Puede o no contener agujas y/o jeringas descartables.

Técnica para el médico:

Modo de empleo

- Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux está destinado a ser inyectado en la dermis media o superficial por un médico. El procedimiento debe realizarse mediante multiinyección intradérmica superficial de manera manual con jeringa o por medio de una pistola multipunción previamente desinfectada.
- Puesto que la habilidad técnica del profesional es esencial para el éxito del tratamiento, Intraderm/ RM - Remodeling/ R – Redux debe ser utilizado por médicos que hayan recibido una formación específica sobre la técnica de inyección de este tipo de productos.
- El producto debe utilizarse en su estado original, tal y como se suministró. Toda modificación o utilización de este producto que no esté contemplada en las condiciones de uso definidas en este instructivo puede tener un efecto adverso sobre la esterilidad, homogeneidad y/o rendimiento del producto.
- Antes de comenzar el tratamiento, conviene informar al paciente de las indicaciones del

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

mismo, de las contraindicaciones, de las incompatibilidades, así como de los posibles efectos no deseados.

- Antes de la inyección, se debe efectuar una desinfección previa rigurosa de la zona a tratar.
- Si considera necesario, puede colocar crema anestésica para confort del paciente previo a la inyección.
- Inyectar lentamente en la dermis media y/o superficial siguiendo técnicas intradérmicas y/o técnicas puntiformes con la aguja, según criterio médico. Se recomienda una aguja de 30G o 32G
- Se recomienda no administrar por sesión no más de 10 ml para área corporal.
- La profundidad de la inyección no debe superar los 4 mm
- Se recomienda un tratamiento de 10 sesiones separadas en intervalos de 1 a 2 semanas. Es posible repetir el ciclo anualmente.
- Presentación en vial: Prepare la jeringa y agujas que va a utilizar, levante el protector del tapón y perfora el mismo con la aguja conectada a la jeringa. Retire la cantidad de producto necesario. Cambie de aguja antes de aplicar el producto al paciente. Siga la técnica indicada para la presentación en jeringas.
- Presentación en jeringa: Sacar la jeringa del pouch o blister sujetándola por el barril sin tocar el vástago. La administración debe realizarse en condiciones asépticas, teniendo especial cuidado al quitar el tapón protector de la punta de la jeringa. Antes de encastrar la aguja, girar un cuarto de vuelta el obturador, sosteniendo la jeringa desde la conexión luer-lock y quitar el tapón. Luego, sosteniendo la jeringa desde la conexión luer-lock enroscar la aguja hasta que la misma haga tope con el final de la rosca. No seguir enroscando al sentir el tope de la aguja ya que podría desplazarse el cabezal luer- lock hacia adelante sacando de lugar dicho cabezal. Luego quitar la funda protectora de la aguja tirando de la misma. Si el montaje es incorrecto, existe el riesgo de que la aguja se separe de la jeringa durante la inyección.



- El calibre y la longitud de la aguja influyen en la fuerza necesaria para hacer salir el producto. Si se utiliza una aguja más estrecha, puede que la resistencia durante la inyección sea demasiado alta, lo que aumentará el riesgo de que el producto rebase o de que la aguja se separe de la jeringa.
- No respetar estas precauciones puede conllevar un riesgo de desprendimiento de la aguja y/o fuga del producto entre el cierre luer-lock y la jeringa.


Condiciones de almacenamiento y transporte:

- Conservar entre 2°C y 35°C
- Evitar el frío excesivo y el calor.
- Evitar la exposición a la luz.
- Manipular con precaución.

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

Producto estéril Método: Autoclave por Calor húmedo
Material para utilizar por única vez.
No usar el producto si el envase está abierto o dañado.
Producto médico no reutilizable, no reesterilizable.
Eliminar remanente de producto según regulaciones vigentes.

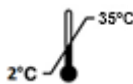SÍMBOLOS UTILIZADOS SEGÚN ISO 15223-1 SYMBOLS IN COMPLIANCE TO ISO 15223-1 SÍMBOLOS USADOS DE ACORDO COM A ISO 15223-1			
	LIMITE DE TEMPERATURA TEMPERATURE LIMIT LIMITE DE TEMPERATURA		CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
	FLUIDO ESTERIL POR CALOR HUMEDO STERILE FLUID PATH FLUIDO ESTERILIZADO ATRAVÉS DE VAPOR		PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA KEEP AWAY FROM SUNLIGHT MANter AFASTADO DA LUZ SOLAR
	NO REESTERILIZAR DO NOT RSTERILIZE NÃO RSTERILIZE		PROTEGER DE LA HUMEDAD KEEP DRY PROTEGER DA UMIDADE
	NO REUTILIZAR DO NOT RE USE NÃO REUTILIZE		FABRICANTE MANUFACTURER FABRICANTE
	DISPOSITIVO MEDICO MEDICAL DEVICE DISPOSITIVO MÉDICO		LOTE LOT NÚMERO DE LOTE
	FECHA DE FABRICACION DATE OF MANUFACTURE DATA DE FABRICAÇÃO		FECHA DE VENCIMIENTO USE-BY DATE DATA DE VALIDADE
	NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA ABIERTO O DAÑADO DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED AND CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE NÃO UTILIZE SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA		NO CONTIENE LÁTEX NATURAL DO NOT CONTAINS NATURAL RUBBER LATEX NÃO FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL


MODIFICACIONES

Revisión	Descripción
0	23/06/2026 Versión Original

Código IFU: 013GSIUMHTIESPÑ
Rev.00 Fecha 23/06/2026

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

Allanmar International Company S.R.L.	PM-1058-35 APENDICE IV	Fecha: 23/06/26
		REV.:00

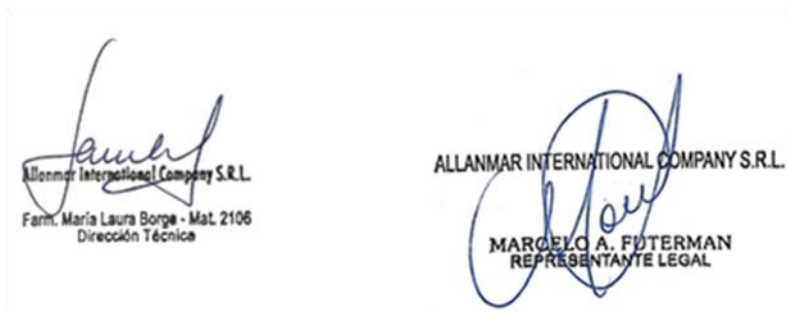

IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-93141639-APN-INPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 24 de Septiembre de 2026

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- 79558

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.24 08:49:29 -03:00

Lorena Terrizzano
Director Nacional
Instituto Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.24 08:49:30 -03:00