MODELO DE ROTULO *(ANEXO IIIB Dispo. 2318/02)*

Sistema laser de Dióxido de carbono

Marca: CPMT

Modelos: PureLase , VanLase

Producto Médico Importado por: TECNOLOGÍA LASER CORNEAL S.R.L. DEL CARMEN NRO. 716, PB, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Fabricado por: CPMT Laser USA LLC. 2828 Coral Way Ste 312. Miami, FL. 33145, Estados Unidos.

NÚMERO DE SERIE: xxx FECHA DE FABRICACION:

Indicaciones, instrucciones de uso, advertencia, contraindicaciones, conservación, modo de uso se indican en el manual de instrucción.

Director Técnico: Ingeniero: DEL CAMPO LEYBA FERNANDO, Matrícula Nº I-6333

Autorizado por la ANMAT PM-2310-57

"Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

SUMARIO DE MANUAL DE INSTRUCCIONES *(ANEXO IIIB Dispo. 2318/02)*

Sistema laser de Dióxido de carbono

Marca: CPMT

Modelos: PureLase y VanLase


Producto Médico Importado por: TECNOLOGÍA LASER CORNEAL S.R.L. DEL CARMEN NRO. 716, PB, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Fabricado por: CPMT Laser USA LLC. 2828 Coral Way Ste 312. Miami, FL. 33145, Estados Unidos.

Director Técnico: Ingeniero: DEL CAMPO LEYBA FERNANDO, Matrícula N° I-6333

Autorizado por la ANMAT PM-2310-57

"Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

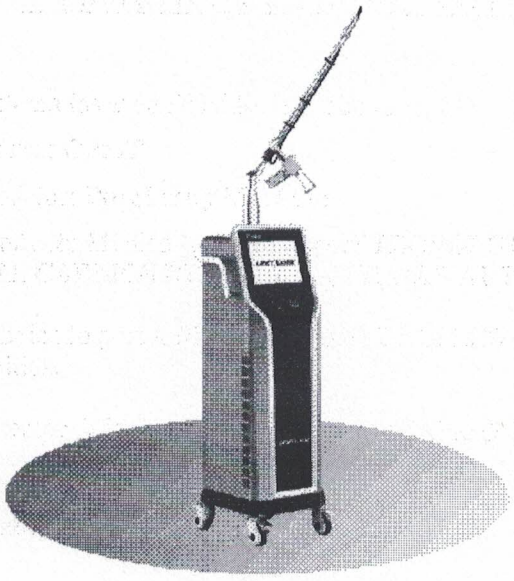

- **Modelo 1: PureLase** (Sistema de consola vertical optimizado para soluciones reconstructivas globales de la piel, rejuvenecimiento cutáneo fraccional y aplicaciones quirúrgicas/ginecológicas avanzadas).
- **Modelo 2: VanLase** (Sistema de consola vertical con diseño estético de panel alternativo y variantes en la disposición periférica, compartiendo idéntica funcionalidad central y potencia de emisión electromédica).

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

Parámetro Técnico	Especificación de Hardware (PureLase / VanLase)
Tipo de Láser	Láser de Dióxido de Carbono (CO_2) excitado por Radiofrecuencia (RF Laser Tube).
Longitud de Onda Principal	10.600 nm (Espectro infrarrojo lejano).
Potencia de Salida Máxima	30 Watts para configuración estándar US (Hardware con capacidad nominal hasta 40 Watts).
Haz de Guía (Aiming Light)	Láser de diodo semiconductor de 635 nm (Espectro visible rojo).
Sistema de Entrega del Haz	Brazo óptico articulado balanceado de 7 articulaciones (7-articular arm).
Clasificación de Riesgo	Clase III (Sugerida según reglas de la Disposición ANMAT para equipos activos de corte/ablación).
Certificación Internacional	FDA Cleared bajo el código de registro regulatorio K232133.

Un sistema láser de CO_2 generalmente consta de una unidad portátil con un panel de control y un emisor láser. El emisor láser está diseñado para producir un haz enfocado de energía láser de CO_2. El panel de control permite al operador ajustar configuraciones como la potencia, la duración y el patrón del tratamiento con láser. En general, la apariencia de un sistema láser de CO_2 es profesional y tecnológicamente avanzada, lo que refleja su papel como herramienta de vanguardia en los tratamientos cosméticos.

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Los sistemas operan emitiendo energía lumínica coherente a una longitud de onda de 10.600 nm. Esta frecuencia específica presenta un coeficiente de absorción crítico y selectivo por el agua contenida en los tejidos biológicos corporales (actuando el agua como el cromóforo diana principal).

Mecanismo de Interacción Tisular y Efecto Biológico:

Al impactar sobre el tejido diana, la energía lumínica se transfiere y se transforma de manera instantánea en energía térmica de alta densidad. Esto eleva la temperatura del agua celular e intracelular por encima de los 100 °C de forma casi inmediata, generando los siguientes fenómenos controlados:

1. Fototermólisis Fraccional (Modo Escáner): La entrega de energía se divide en una matriz de microhaces que perforan la epidermis creando columnas térmicas microscópicas denominadas Zonas de Tratamiento Microscópicas (MTZs). Estas columnas penetran en la dermis profunda produciendo una vaporización controlada, mientras que el tejido circundante entre los micropuntos permanece completamente intacto y sano. Este tejido remanente actúa como un reservorio biológico que acelera drásticamente la reepitelización y la curación tisular, disminuyendo el tiempo de inactividad clínica (downtime).

Tecnología Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

2. Remodelación del Colágeno Dérmico y Mucoso: El choque térmico controlado en las MTZs desnaturaliza las fibras de colágeno viejo y elastina existentes, induciendo una contracción inmediata del tejido. Secuencialmente, se activa una cascada de respuesta inflamatoria subclínica que estimula la actividad de los fibroblastos, iniciando la neocolaGenesis (síntesis de colágeno nuevo tipos I y III) a lo largo de las semanas posteriores al procedimiento. Este proceso reestructura la matriz extracelular, mejorando la tensión tisular tanto en la dermis cutánea como en las paredes de la mucosa vaginal (VRL - Vaginal Rejuvenation Laser).

3. Ablación Quirúrgica Pura y Coagulación Simultánea: En el modo de corte enfocado, la alta densidad de potencia vaporiza las capas tisulares de forma lineal y precisa. Simultáneamente, la transferencia térmica colateral hacia los márgenes de la incisión sella los vasos sanguíneos capilares y linfáticos (fotocoagulación), disminuyendo el sangrado intraoperatorio y el edema postquirúrgico.

Arquitectura Física y Hardware (Sistema de Estímulo y Suministro):

- Generador Láser (Tubo de RF): Componente central sellado donde se produce la excitación de las moléculas de gas mediante radiofrecuencia. Proporciona una descarga de energía estable y homogénea, superior a los tubos tradicionales de vidrio excitados por corriente continua.
- Sistema de Entrega Óptica: Consiste en un brazo articulado de 7 articulaciones (7-articular arm beam support) que utiliza espejos internos de alta reflectividad para guiar el haz invisible de 10.600 nm acoplado de forma coaxial con el haz guía visible de 635 nm.
- Módulo de Enfriamiento por Aire (Air Cooling System): Sistema de refrigeración integrado de alta capacidad diseñado para disipar el calor del tubo de RF, permitiendo el uso continuo del equipo las 24 horas sin decaimiento de potencia o paradas por sobrecalentamiento.
- Dispositivos de Interbloqueo y Control: Incluye un interruptor de parada de emergencia en el panel frontal, un conector de enclavamiento remoto (interlock) trasero para la seguridad de la sala y un interruptor de pedal (pulsador) reforzado para el disparo manual por parte del operador médico.

Estructura y Funciones del Software Operativo:

El sistema cuenta con un software propietario embebido ejecutable mediante una interfaz táctil de pantalla LED de operación intuitiva, dividida en los siguientes módulos:

- Módulo de Calibración Automática: Al encender el equipo, el sistema realiza una autodepuración y verificación de los componentes de hardware (toma aproximadamente 3 minutos) antes de permitir la inspección normal o el disparo.
- Módulo de Control Cinemático del Escáner: Gobierna los espejos galvánicos de la pieza de mano fraccional para modular los siguientes parámetros de escaneo (Scan Specifications):
  - Formatos de Escaneo (Scan Patterns): Cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, óvalo, línea recta, espiral y diamante de 6 puntas.
  - Tamaño del Área: Regulable desde un mínimo de 0.1 x 0.1 mm hasta un área máxima de 20 x 20 mm.

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

○ Modos Quirúrgicos y de Pulso: Configuración de la tasa de repetición en modo Continuo, Pulso Único (Single), Pulsado (Pulse) y Super Pulse (Superpulsado para alta energía con mínima duración de pulso de 0.1 a 2.6 ms).

● Módulo de Gestión de Protocolos: Almacenamiento de parámetros preprogramados ajustados según la indicación clínica y las características del tejido del paciente.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entorno Requerido para el Funcionamiento e Instalación:

● Temperatura del Ambiente Operativo: 5 ° C a 40 ° C.

● Humedad Relativa del Aire: Menor o igual al 85%.

● Rango de Presión Atmosférica: 760 hPa a 1060 hPa.

● Requisitos de la Sala: Debe instalarse sobre una superficie nivelada y plana, en una sala limpia y seca, preferentemente con cable de puesta a tierra exclusivo y con condiciones de iluminación controlada/atenuada para optimizar la visualización del haz de guía de 635 nm.

Especificaciones Eléctricas y Mecánicas:

● Alimentación Eléctrica: a.c. 100~120 V / 200~240 V (Autoconfigurable o mediante puente interno de hardware).

● Frecuencia de Red: 50 Hz / 60 Hz (Apto para la red eléctrica nacional de Argentina).

● Potencia de Entrada Nominal / Consumo: 2000 VA.

● Dimensiones Estructurales: Consola principal: 48 x 48 x 126 cm. Caja de transporte del brazo óptico: 109 x 36.5 x 22 cm.

● Pesos: Peso neto del brazo articulado: 40 kg. Peso bruto total de la consola: 63 kg. Montado sobre un chasis de 4 ruedas de alta movilidad.

MATRIZ DE PROBLEMAS COMUNES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Para facilitar las tareas de soporte y asegurar la estabilidad del equipamiento en la institución médica, se establece la siguiente guía de diagnóstico auxiliar ante fallas menores del sistema:

Falla Detectada	Causa Probable	Método de Solución Sugerido para el Servicio Técnico
El sistema no inicia o la pantalla táctil permanece apagada tras el encendido.	- Cable de alimentación desconectado. - Fusible de entrada quemado. - Voltaje de red inadecuado o inestable.	- Verificar la conexión al tomacorriente de la pared. - Revisar y reemplazar el fusible en el receptáculo trasero si corresponde. - Instalar un estabilizador/regulador de tensión externa si el voltaje fluctúa.
El software de la pantalla	- Error de inicialización en el	- Apagar el equipo mediante el

Tecnología Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 1-6333

Falla Detectada	Causa Probable	Método de Solución Sugerido para el Servicio Técnico
táctil se bloquea o no responde a los comandos del operador.	bus de comunicación interno. - Demasiados subprocesos abiertos en el módulo de control.	interruptor principal, aguardar 15 segundos y volver a encender para reiniciar el microprocesador.
El haz láser de CO2 no se emite al presionar el pedal (pulsador).	- Pedal mal conectado o cable dañado. - Interbloqueo de seguridad (Interlock) trasero abierto. - Botón de emergencia presionado.	- Conectar firmemente el enchufe del pedal o reemplazar el cable si presenta discontinuidad. - Verificar que el puente del Interlock esté colocado. - Girar el botón de emergencia para desenclavarlo.
No se observa el haz de guía rojo de 635 nm en el extremo de la pieza de mano.	- Desalineación óptica de los espejos en el brazo articulado. - Diodo semiconductor quemado o sin alimentación.	- Realizar un procedimiento de alineación de los espejos del brazo articulado de 7 articulaciones. - Comprobar la tarjeta de control de alimentación del diodo guía.

Comparativa de modelos:

Parámetro / Característica	Modelo: PureLase	Modelo: VanLase
Longitud de Onda	10.600 nm	10.600 nm
Fuente Láser (Generador)	Tubo de Radiofrecuencia (RF)	Tubo de Radiofrecuencia (RF)
Potencia Nominal	30W - 40W Máx.	30W - 40W Máx.

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

Parámetro / Característica	Modelo: PureLase	Modelo: VanLase
Longitud de Onda	10.600 nm	10.600 nm
Haz de Guía	Diodo semiconductor (635 nm)	Diodo semiconductor (635 nm)
Diseño del Gabinete (Chasis)	Consola vertical robusta de alta gama con porta-accesorios integrado.	Consola vertical estilizada con distribución perimetral de controles de mandos.
Interfaz de Usuario (UI)	Pantalla LED táctil con software de calibración modular Pure.	Pantalla LED táctil con distribución de menú optimizada Van.
Orientación Comercial Principal	Clínicas ginecológicas y centros dermatológicos de alta complejidad quirúrgica.	Clínicas de medicina estética avanzada, dermatología cosmética y rejuvenecimiento.

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

ACCESORIOS:

NO.	Nombre	QTY.	Imagen
1	Brazo láser	1	
3	Cable de alimentación	1 PC	
4	Llave de inicio	2 PC	
5	Gafas	1 PC	
6	Gafas protectoras	10600 nm	
9	Pedal	1 PC	
10	Sondas	2 piezas (El tercero es opcional)	
11	Pieza de mano	1 (El segundo y el tercero las piezas de mano son opcionales)	

Indicación, finalidad o uso al que se destina el producto médico según lo indicado por el fabricante;

Un sistema láser de CO2 está indicado para la incisión, escisión, ablación, vaporización y coagulación de los tejidos blandos del cuerpo en especialidades médicas que incluyen estética (dermatología y cirugía plástica), podología, otorrinolaringología (ORL), ginecología, neurocirugía, ortopedia, cirugía general y torácica (incluida la abierta y endoscópica), cirugía dental y oral y cirugía genitourinaria. El uso con la unidad de escaneo está indicado para el rejuvenecimiento cutáneo ablativo.

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

CONTRAINDICACIONES

Existen una serie de contraindicaciones para el rejuvenecimiento con láser de CO2. La presencia de lesiones activas de acné puede provocar infección o colonización anormal después del procedimiento. Las heridas abiertas o la infección activa, particularmente por el virus del herpes simple, también deben posponer el procedimiento hasta después de la resolución. El daño anexial de enfermedades autoinmunes, quemaduras o irradiación puede interferir con la reepitelización, y los pacientes con antecedentes de estas afecciones pueden no ser candidatos para el tratamiento con láseres de CO2. Además, el uso reciente de isotretinoína oral en los últimos 6 a 12 meses puede provocar un retraso en la cicatrización de heridas o cicatrices indeseables. Por último, una historia de enfermedades asociadas con el fenómeno de koebnerización, incluidos el vitíligo y la psoriasis, también son contraindicaciones para esta terapia.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso seguro y confiable del sistema PureLase requiere que todos los operadores y el personal de asistencia comprendan completamente la información de seguridad completa detallada en este capítulo. Maximizar la seguridad de los pacientes, operadores e individuos involucrados ha sido la máxima prioridad durante todo el diseño y desarrollo de esta avanzada tecnología médica. El personal capacitado y calificado puede operar de manera segura la máquina PureLase bajo los protocolos adecuados para la operación y el mantenimiento. Es esencial que el operador y cualquier personal de apoyo comprendan y cumplan a fondo las siguientes precauciones de seguridad cruciales:

1. Sistema de inspección automática, se inicia poco después de encender la máquina y monitorea continuamente el circuito eléctrico en todo el proceso de operación.
2. Usando el cabezal de tratamiento en la piel del paciente, la energía solo se transfiere desde la punta del cabezal de tratamiento
3. Este dispositivo ha sido diseñado con alta seguridad eléctrica, la energía se cortará automáticamente en caso de fuga de electricidad.
4. El botón rojo de emergencia se puede usar para cortar la fuente de alimentación inmediatamente cuando ocurren problemas de emergencia.
5. Las teclas de interruptor pueden aumentar la seguridad de la PureLase.No persona sin la llave no puede encender la máquina láser.

El estricto cumplimiento de estas pautas de seguridad es esencial para el rendimiento seguro y eficaz del sistema PureLase. Todos los operadores y el personal de apoyo deben estar completamente capacitados y certificados para usar este dispositivo médico de alta tecnología. Al priorizar la seguridad, podemos garantizar los mejores resultados posibles para los pacientes mientras protegemos a todo el personal involucrado.

Terapeuta: El terapeuta debe preguntar la sensación de calor del paciente en cualquier momento durante el proceso de tratamiento.

Quirófano: El quirófano debe marcar claramente los símbolos de advertencia de peligro del láser (ref. Figura 1)

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333



Figura 1 Símbolos de advertencia láser

El quirófano debe estar desprovisto de objetos altamente reflectantes, como espejos. Solo se permite la entrada al quirófano de personal capacitado.
Asegúrese de que el operador esté completamente familiarizado con el funcionamiento del sistema y conozca el procedimiento para el apagado urgente del sistema.

Seguridad eléctrica y mecánica:

1. Asegúrese de que todos los paneles y tableros de cubierta se mantengan cerrados en todo momento para evitar posibles peligros.
2. Este dispositivo contiene componentes de alto voltaje que pueden ser peligrosos. Incluso después de apagar, puede haber electricidad residual en ciertas partes. Solo los mecánicos autorizados pueden abrir el equipo.
3. Al realizar el mantenimiento, recuerde siempre desenchufar la fuente de alimentación. No intente abrir el tablero de la cubierta y absténgase de observar personalmente durante los procedimientos de mantenimiento.

【PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES】

1. No use etanol, acetona ni ninguna otra sustancia inflamable en la piel antes del tratamiento. Si es necesario, utilice agua y jabón.
2. El dispositivo no debe usarse en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
3. Evite trabajar con el sistema cerca de disolventes volátiles como alcohol o gasolina.
4. Al desinfectar el dispositivo con productos a base de alcohol, asegúrese de que el alcohol se evapore por completo antes de su funcionamiento.
5. El sistema no debe funcionar en un entorno que contenga materiales inflamables.
6. Evite trabajar en áreas donde haya solventes inflamables o explosivos como etanol y gasolina.

【CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD】

Familiarícese con la configuración de seguridad del equipo y sus respectivas ubicaciones y métodos de uso.

1. Llaves: Se utilizan para alternar el encendido / apagado y son proporcionadas exclusivamente por el fabricante.
2. Botón de emergencia: El interruptor rojo sirve para cortar la energía en situaciones de emergencia. Al presionarlo, se desconectará inmediatamente la fuente de alimentación, apagando la máquina. Para volver a encenderlo, gire el botón de emergencia en el sentido de las agujas del reloj para restablecerlo y la máquina reanudará su funcionamiento.

【INSPECCIÓN AUTOMÁTICA】

Después de encender la máquina, el sistema realizará una inspección automática del circuito eléctrico. Este proceso suele tardar aproximadamente entre 1 y 3 minutos en


Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
M.N. 1-6333

completarse. Una vez finalizada la inspección, la máquina pasará a la interfaz de tratamiento.

【CLASE DE EQUIPO】
1. Clase de protección: CLASE I, BF
2. Líquido anticorrosivo: General
3. No permitido: Uso en presencia de anestésico inflamable mezclado con aire u óxido nitroso
4. Modo de operación: Operación continua

Etiquetas del sistema
Las etiquetas de identificación se adjuntan al dispositivo del sistema: PLACA DE IDENTIFICACIÓN (Modelo) ETIQUETA:

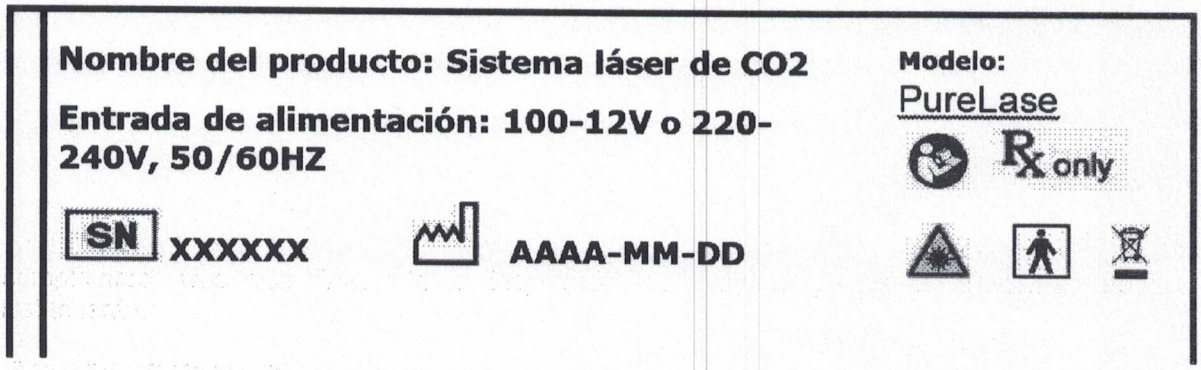

Símbolo de radiación láser de seguridad: Ubicado en el panel posterior del sistema. Peligro de emisión láser: advierte contra la posible exposición a la radiación del rayo láser y especifica el tipo y la clasificación de los rayos láser presentes.
Clase de láser: 4

Figura 2. Clasificación de los rayos láser



Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

SN	Número de serie
	¡Atención! Ver instrucciones de uso
	Equipo tipo BF (protección contra descargas eléctricas)
	Fecha de fabricación
	PRECAUCIÓN: La ley federal restringe la venta de este dispositivo por o por orden de un médico
	Colección separada
	Mantener seco

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

A. No instale el producto en áreas aceitosas, humeantes, húmedas o polvorientas, o áreas propensas a salpicaduras de agua (como la lluvia).
B. Instale el producto sobre una superficie nivelada.
C. Evite doblar el cable eléctrico o los accesorios con fuerza y absténgase de colocar objetos afilados o pesados sobre ellos para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
D. Evite enchufar varios cables de alimentación de aparatos eléctricos en un solo receptáculo simultáneamente para evitar el riesgo de incendio.
E. Asegúrese de que el producto esté instalado con el voltaje nominal especificado. Si no lo hace, puede provocar daños en el circuito o un incendio.
F. La persona responsable de manejar el aparato debe estar bien versada en todas las normas de seguridad.
G. Asegúrese de que todos los accesorios estén enchufados con precisión y colocados correctamente.
H. Los problemas derivados de negligencia en el uso o la gestión del sistema durante el funcionamiento no están cubiertos por la garantía de servicio.

Condiciones de trabajo
a) Rango de temperatura ambiente: 22 °C ~ 28 °C;
b) Rango de humedad relativa: ⩽80%;
c) Rango de presión atmosférica: 860 hPa ~ 1060 hPa;
d) Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Condiciones de transporte y almacenamiento
a) Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 60 °C;
b) Rango de humedad relativa: ⩽100%;
c) Rango de presión atmosférica: 500 hPa ~ 1060 hPa.

Instalación

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 16333

1. Abrir paquete y coloque el aparato en el área de trabajo especial como se indica anteriormente
2. Monte los soportes de la pieza de mano en la máquina principal con tornillos
3. Conecte la pieza de mano con la máquina principal y asegúrese de una buena conexión
a. Presione el botón en el conector
b. Conéctelo a la toma de corriente de la máquina principal hasta que escuche un sonido de clic y los botones reboten.
4. Conecte el cable de alimentación con el dispositivo y, a continuación, encienda el interruptor de encendido
5. Compruebe si el botón de emergencia está en estado de liberación
6. Encienda las llaves, la máquina está encendida, la pantalla muestra la interfaz de bienvenida con CPMT LASER.

Advertencia

A. Si tiene algún problema con este producto, deje de usarlo inmediatamente y contáctenos.
B. No ponga ningún inflamable en el producto.
C. No desmonte, repare ni remodele el producto a discreción del usuario. Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda para repararlo. (Puede haber riesgo de descarga eléctrica o incendio).
D. Póngase en contacto con nosotros para una revisión o reparación del producto en los siguientes casos:
-Hay daños en un cable o enchufe, y el producto no funciona correctamente -El producto se cayó y se dañó -El producto está mojado con agua.
E. Inserte un enchufe en un enchufe de pared con conexión a tierra
F. No utilice un cable eléctrico dañado o un receptáculo envejecido. (Puede haber riesgo de descarga eléctrica o incendio)
G. No dé descargas al producto o a los accesorios

El equipo se presenta debidamente embalado y contiene: Unidad principal con sus componentes.

Tecnologia Laser Corneal SRL
CRISTIAN HIRTH
SOCIO GERENTE

FERNANDO del CAMPO
DIRECTOR TECNICO
M.N. 1-6333

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-95680623-APN-INPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Octubre de 2026

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- 80037

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.01 08:54:52 -03:00

Lorena Terrizzano
Director Nacional
Instituto Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.01 08:54:53 -03:00